

Instruções para Lubrificação Preventiva

Maca Elétrica 300Z



ATENÇÃO:

Para maior preservação e proteção de seu equipamento é recomendável realizar estes 2 procedimentos abaixo trimestralmente:

- Aplicação de Cera Automotiva em todas as partes pintadas da maca de branco ou preto.
- Aplicação de Óleo lubrificante Spray WD40, em todas as partes metálicas/ferrosas da maca (parafusos, porcas, suportes, articulações, alavancas, pés niveladores, trilhos móveis, prolongadores, etc).


Estes procedimentos são indispensáveis para um bom funcionamento do equipamento **principalmente em áreas litorâneas.**

Lubrificação Preventiva Maca 300Z

Material a ser utilizado: Óleo lubrificante Spray WD40 ou Similar, Graxa ou Vaselina industrial, Pincel médio.



- 1) Erga os quatro **Pés Niveladores** localizados na base do equipamento e lubrifique seus mecanismos conforme foto abaixo, para que os mesmos não fiquem endurecidos com o tempo.

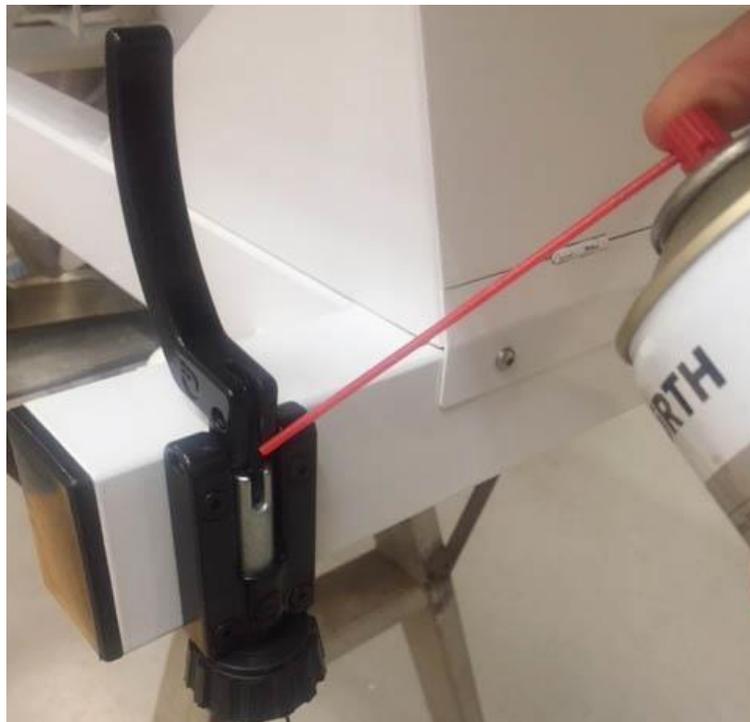

- 2) Caso sua maca esteja equipada com o kit opcional de braços articuláveis, lubrifique os pinos de suporte conforme imagem abaixo.




- 3) Para a lubrificação dos rodízios, aplique óleo spray nas superfícies indicadas abaixo.



4. Puxe o prolongador dos pés e aplique o óleo spray na parte superior dos tubos afim de que possam deslizar sempre adequadamente.



5. Lubrifique o interior dos dois trilhos por onde correm os estofamentos da cabeça.

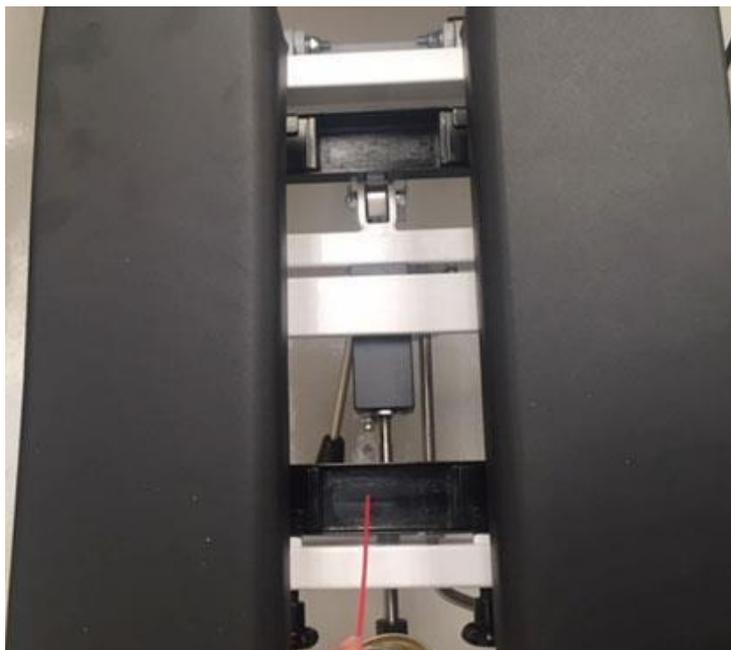

6. Aplique o óleo spray nas articulações que possibilitam o movimento do quadro cervical para cima e para baixo.




7. Aplique com um pincel, graxa ou vaselina industrial no mecanismo dos movimentos de lateralização da região cervical. Fica localizado abaixo dos estofamentos da cabeça.



8. Ainda na região cervical, lubrifique com óleo spray, o mecanismo inferior de acionamento do amortecedor.



9. Lubrifique também os tubos do prolongador dos braços, em sua parte superior, conforme foto abaixo.

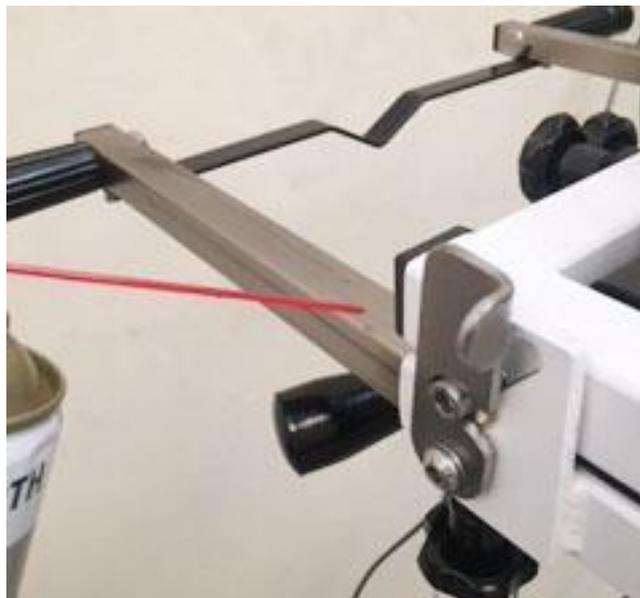


10. Lubrifique o suporte inferior de fixação do motor.



11. As articulações dos movimentos caudais da maca também devem ser lubrificadas conforme fotos abaixo.



12. Utilize o pincel para passar um pouco de graxa ou vaselina no Eixo de regulagem de força do movimento de flexão distração que fica localizado abaixo do estofamento das pernas.

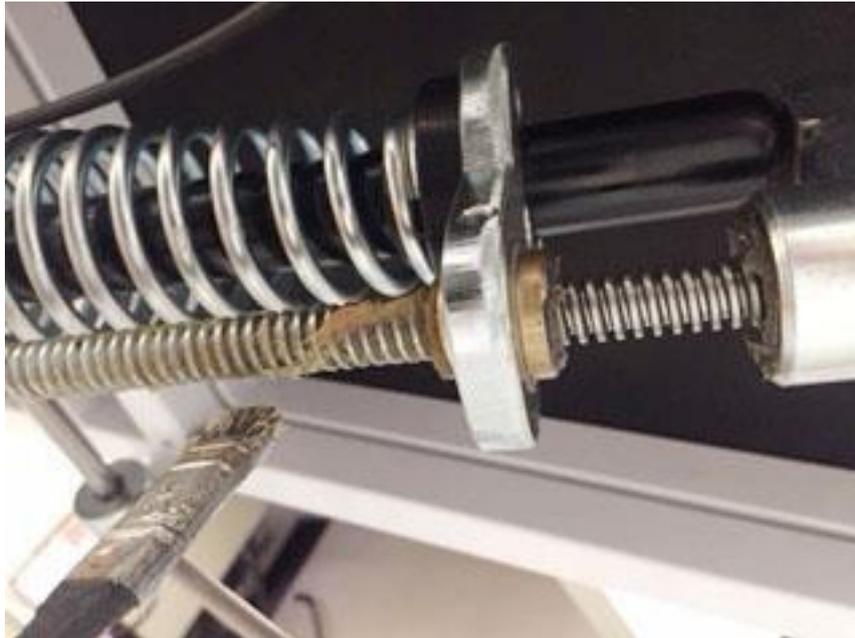

13. Aplique óleo spray nas articulações da regulagem de pressão dos movimentos de flexo distração, ficam localizadas logo abaixo do estofamento das pernas.

